
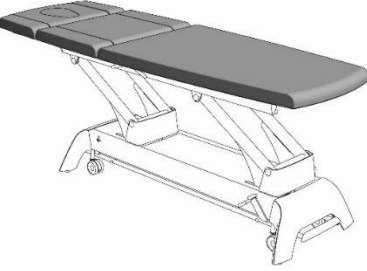
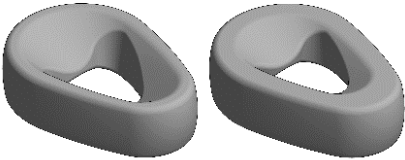


	Général	Nettoyage	Désinfection
Construction 	<ul style="list-style-type: none"> Matériaux: Acier ou aluminium enduit de poudre Acier, chrome ou évier plaqué Plastiques durs et mous Placage de hêtre pressé et collé (gymna.ONE) 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez régulièrement les surfaces avec un chiffon en microfibre propre, doux et sec. Pour les taches persistantes, un chiffon légèrement humide peut être utilisé. Utilisez de l'eau propre ou un nettoyant pour vitres. Retirez immédiatement tout liquide renversé. 	<p>En cas de besoin, la construction peut être désinfectée en utilisant la même méthode que pour les coussins ou l'Ergomax.</p>
Coussins 	<p>Matériaux:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vinyle similicuir 'CLASSIQUE: toutes les tables des séries Classic, G2, Advanced, Luxe, gymna.GO et gymna.PRO. SAUF OPTION gymna.PRO 'PREMIUM' (similicuir polyuréthane) -> voir votre FACTURE. <p>Détails:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans phtalates Biocompatible 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez de l'eau tiède et un chiffon en microfibre pour le nettoyage. Ajoutez une solution de savon au PH neutre en cas de taches persistantes. Éliminez les résidus de savon à l'aide d'un chiffon humide. 	<p>Attention : il faut toujours nettoyer avant de désinfecter !</p> <p>De nombreux désinfectants peuvent être utilisés pour désinfecter des coussins ordinaires et l'Ergomax. ERGOMAX EST LE SEUL SUPPORTANT DE L'ALCOOL.</p> <p>Ces désinfectants sont mentionnés à la page 2.</p>
Ergomax 	<p>Matériaux:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mousse de polyuréthane <p>Détails:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imperméable : permet de laver le coussin Ergomax sous le robinet. 	<ul style="list-style-type: none"> Les taches de sang doivent être immédiatement éliminées à l'eau froide. L'huile de massage doit être éliminée immédiatement avec une solution savonneuse au PH neutre. 	<ul style="list-style-type: none"> Suivez toujours la concentration prescrite indiquée ou mentionné sur l'emballage. N'utilisez qu'un seul désinfectant et rincez à l'eau claire.
Supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> NE JAMAIS utiliser de détergents, solvants (alcool), savons agressifs, agents de blanchiment ou abrasifs. N'utilisez aucune substance pour le cuir contenant de l'huile ou de la graisse pour l'entretien. N'utilisez jamais un mélange de divers désinfectants. Les coussins et l'Ergomax ne conviennent pas pour la désinfection ou la stérilisation par la chaleur. 		

Désinfectants	Classique	Premium
Acryl-des	●	
Actichlor Plus		● 5000 ppm
Actrill Cold Sterilant		● 100%
Aldasan 2000	●	
Alpet D2	●	
Antifect FD 10	●	
Antigone wipes	●	
Antiseptica Kombi Flächen	●	
B10	●	
Bacillol 30 foam	L ●	● 100%
Bacillol 30 tissues		●
Bacillol AF	●	
Bacillol AF-tissues	●	
Biguacid Plus	●	
Biguacid-S	●	
Biguanid Fläche N	●	● 4%
Chlor-Clean tablets		● 5000 ppm
Cleanisept	●	
Clinell Alcohol wipes	●	
Clinell Sporicidal wipes		●
Clinell Universal wipes/spray	●	
Clorina	●	
CosiMed	●	
Descocid-N	●	
Descogen Liquid	●	
Descosept AF	●	
Descosept Sensitive wipes/spray	●	●
Desomed Rapid Universal	●	
Dettol		● 5%
Dismozon pur		● 4%
Esemfix	●	
Ethanol		● 75%
Formaldehyde		● 30%
Fugaten	●	
Germatol		● 100%
Gevisol	●	
Haz-Tabs		● 5000 ppm
Hexaquart plus	●	
Hexaquart SF	●	
Hospisept - wipes	●	
Hydrogenperoxide		● 30%

Désinfectants	Classique	Premium
Immix Clean	●	
Incidin Extra N		● 5%
Incidin foam		● 100%
Incidin OxyFoam		● 100%
Incidin OxyFoam S		● 100%
Incidin OxyWipe S		●
Incidin Plus		● 4%
Incidur Active	●	
Incidur Extra	●	
Incidur Extra N	●	
Incidur Foam	●	
Incidur Liquid Spray	●	
Incidur Perfekt	●	
Incidur Plus	●	
Incidur rapid	●	
Incidur Spray	●	
Isopropanol		● 45%
Joya	●	
Kohrsolin extra tissues	●	
Lysoformin	●	
Lysoformin 2000	●	
Lysoformin spezial	●	
Maxitücher Alkoholfrei		●
Maxitücher Gebrauchsfertig Ruck		●
Meliseptol	●	● 100%
Meliseptol foam pure + fresh	●	
Meliseptol rapid	●	
Melsept SF	●	
Melsitt	●	
Micro Clean	●	
Micro Clean Foam	●	
Mikrobac forte	●	
Mikrobac tissues	●	
Mikrozid AF liquid	●	
Mikrozid AF wipes	●	●
Mikrozid sensitive liquid	●	
Mikrozid sensitive wipes	●	
Mikrozid universal wipes premium		●

Désinfectants	Classique	Premium
Neoform M rapid	●	
Optisal N	●	
Optisept	●	
P3-topax 66		● 5%
Perform	●	
Pursept-A Xpress	●	
Pursept-FD	●	
Sagrotan Hygiene-spray	●	● 100%
Sani-Cloth Active - wipes	●	
Sanit P20		● 100%
Septapin Aquaquick	●	
Septapin wipes	●	
Sodium hypochlorite		● 5000 ppm
Sprint 200		● 2%
Suma bac D10		● 1%
Suma Tab D4	●	
Surfa Safe	●	
Surfa Safe Premium		● 100%
Surfanios Premium		● 3%
Terralin liquid	●	
Terralin protect	●	● 4%
Topmax 421		● 5%
TPH protect	●	
Trichlorol	●	
Ultrasol active		● 5%
Umonium medical spray		● 100%
Virkon		● 1%
Volvone		● 40%

Disclaimer

Gymna n'accepte aucune responsabilité quant à l'effet désinfectant des agents énumérés ci-dessus.

© 2020 Gymna S.A.

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication ne peut être reproduit, sauvegardé dans un fichier de données automatisé, ni publié, intégralement ou partiellement, sous quelque forme ou de quelque façon que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie, enregistrement ou tout un autre procédé), sans le consentement écrit préalable de Gymna S.A.